

# Canllaw i Arbedwyr Ocsigen Ecolite 4000



# Cynnwys

Sut i Gysylltu Arbedwr **3**

Gosod Eich Cyflenwad Ocsigen **4**

Diffodd y Cyflenwad Ocsigen **5**

Gwirio Pŵer Batri Eich Arbedwr **5**

Newid y Batris **6**

Cyfnodau Parhau Silindrau Wrth Ddefnyddio Arbedwr **7**

Datrys Problemau **8**



**GWELLA  
BYWYDAU**

# Sut i Gysylltu Arbedwr



1

Rhowch y silindr yn y bag a ddarparwyd



2

Rhowch yr arbedwr yn y boced



3

Cysylltwch y teclyn lleihau llif ar y tiwb troellog â chysylltydd alfa'r silindr



4

Sicrhewch y cysylltiad gyda'r clamp tiwb



5

Cysylltwch ben y tiwb troellog â'r cysylltydd silindr ar yr arbedwr



6

Cysylltwch y tiwbiau trwyn fforchog â'r cysylltiad ar ochr yr arbedwr

## Rhybudd

Nid yw arbedwyr yn addas ar gyfer clefion dan saith oed.

Peidiwch â'i ddefnyddio tra byddwch yn cysgu. Peidiwch â byrhau eich tiwbiau.

Dim ond pan fyddwch yn gwisgo tiwbiau trwyn fforchog y dylech ddefnyddio arbedwr. Ni fydd arbedwyr yn gweithio gyda mygydau.

(ar gael 24 awr, 7 diwrnod yr wythnos ar gyfer galwadau brys)

# Gosod Eich Cyflenwad Ocsigen



Rhowch y tiwbiau trwyn fforchog amdanoch



Trowch yr arbedwr ymlaen drwy wasgu'r botwm on/off unwaith




Gan ddefnyddio'r botymau **- +**, dewiswch y gosodiad yn unol â chyfarwyddyd eich Gweithiwr Gofal Iechyd Proffesiynol



Trowch falf ochr y silindr i on/+, os oes un yno



Trowch y silindr ocsigen i raddfa llif o 4 litr y funud (lpm)

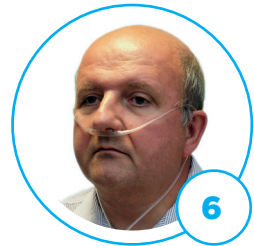

Dechreuwch anadlu drwy'r tiwbiau trwyn fforchog

## Rhybudd

Cofiwch fod rhaid i'r silindr fod wedi'i osod ar gyfradd llif o 4 lpm a'r arbedwr wedi'i osod ar y gosodiad a gyfarwyddwyd

# Diffodd y Cyflenwad Ocsigen

1. Trowch y falf on/off ar y silindr yn araf i gyfeiriad y cloc i'r safle off
2. Daliwch i anadlu drwy'r tiwbiau trwyn fforchog nes byddwch chi'n teimlo nad oes rhagor o ocsigen yn dod trwodd (mae hyn yn lleihau'r gwasgedd yn y tiwbiau)
3. Tynnwch y tiwbiau trwyn fforchog i ffwrdd
4. Diffoddwch yr arbedwr

## Rhybudd

Os yw'r silindr yn cael ei ddefnyddio heb yr arbedwr, cofiwch ei osod yn ôl i'r raddfa llif a ragnodwyd bob tro

# Gwirio Pŵer Batri Eich Arbedwr

Gwasgwch y botwm on/off a gwiriwch ddangosydd y batri a ddangosir.

Dylai batri'r arbedwr bara mwy na phedair wythnos. Gwiriwch lefel pŵer y batri bob tro cyn defnyddio eich arbedwr.



Cadwch fatris sbâr gyda chi bob amser. Os yw dangosydd y batri yn dangos lefel isel, meddyliwch am newid y batris cyn gadael cartref. Bydd yr arbedwr yn cael ei ddarparu gyda batris, eich cyfrifoldeb chi yw eu newid nhw.

(ar gael 24 awr, 7 diwrnod yr wythnos ar gyfer galwadau brys)

# Newid y Batris

Mae angen dau fatri AA ar yr arbedwr.


I newid y batri:

- 1.** Gwnewch yn siŵr fod y ddyfais wedi'i diffodd
- 2.** Tynnwch glawr y batris
- 3.** Gwardwch y batris sydd yno yn ddiogel
- 4.** Rhowch fatri newydd i mewn yn unol â'r cyfarwyddyd yn y diagram ar y ddyfais.
- 5.** Ar ôl i chi newid y batris, gwiriwch lefel y pŵer

## Rhybudd

Defnyddiwch fatri alcaliaidd yn unig gydag arbedwr.

Nodwch: Mae eich arbedwr ocsigen yn parhau yn eiddo i Baywater Healthcare ac mae ar fenthg i'r GIG

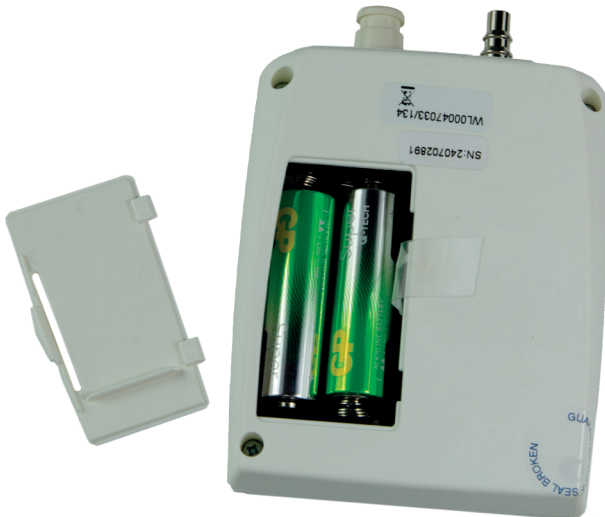

# Cyfnodau Parhau Silindrau Wrth Ddefnyddio Arbedwr

## Cyfnodau parhau silindr Freedom® 400

Gosodiad	Cyfnod parhau bras gydag arbedwr
1	32 awr 10 munud
2	17 awr 40 munud
3	11 awr
4	8 awr 10 munud
5	6 awr 30 munud
6	5 awr 25 munud
7	4 awr 40 munud
8	4 awr 5 munud

## Cyfnodau parhau silindr Freedom® 300

Gosodiad	Cyfnod parhau bras gydag arbedwr
1	23 awr 5 munud
2	12 awr 40 munud
3	7 awr 55 munud
4	5 awr 50 munud
5	4 awr 40 munud
6	3 awr 50 munud
7	3 awr 20 munud
8	2 awr 55 munud

Gall cyfnodau parhau silindrau wrth ddefnyddio arbedwr newid yn ddibynnol ar raddfa anadlu a gweithgarwch y claf.



## Datrys Problemau

Wrth anadlu i mewn gan ddefnyddio arbedwr, dylech chi glywed sŵn hisian. Os nad yw'r sŵn hwn i'w glywed, neu os nad oes ocsigen i'w deimlo'n dod o'r arbedwr:

- Gwiriwch fod yr arbedwr wedi'i droi ymlaen ar y gosodiad llif cywir a bod y silindr wedi'i droi i 4 lpm
- Gwiriwch fod yr holl diwbiau wedi'u cysylltu'n gywir a bod pŵer yn y batri

Os ydych chi'n dal i fethu â chlywed sŵn hisian neu'n teimlo nad oes ocsigen yn dod o'r arbedwr, tynnwch yr arbedwr a chysylltwch y tiwbiau trwyn fforchog yn uniongyrchol â'r silindr. Dylid gosod y silindr ar gyfradd llif yn unol â chyfarwyddyd eich Gweithiwr Gofal Iechyd Proffesiynol. Ffoniwch Baywater Healthcare.



## Cyflenwad ocsigen isel

<b>Sgrin arddangos</b>	<b>Larwm clywadwy</b>	<b>Cam gweithredu</b>
No O2	Oes, ar ôl pob anadl	Gwiriwch y tiwbiau troellog rhag rhwystrau a phlygiadau  Gwiriwch bod digon o ocsigen yn y silindr

## Monitro impylsau anadlu

<b>Sgrin arddangos</b>	<b>Larwm clywadwy</b>	<b>Cam gweithredu</b>
CHECK CANNULA NO BREATHING	Larwm am 30 eiliad yna mae'r arbedwr yn diffodd	Gwiriwch y tiwbiau trwyn fforchog rhag rhwystrau a phlygiadau

## Monitro'r batris

<b>Sgrin arddangos</b>	<b>Larwm clywadwy</b>	<b>Gweithred</b>
CHANGE BATTERY	Oes	Newidiwch y batris

Os nad yw'r camau hyn yn datrys eich problem, tynnwch yr arbedwr, cysylltwch eich tiwbiau trwyn fforchog yn uniongyrchol â'r silindr a'i ddefnyddio ar y gyfradd llif a gyfarwyddwyd gan eich Gweithiwr Gofal Iechyd Proffesiynol. Ffoniwch Baywater Healthcare i gael cyngor.

# Nodiadau

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# Nodiadau

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â:

**Baywater Healthcare**

Wulvern House

Electra Way

Crewe

Cheshire

CW1 6GW

Ffoniwch: 0800 373580

 [healthuk@baywater.co.uk](mailto:healthuk@baywater.co.uk)

 @BaywaterHealth

 Baywater Healthcare

 Baywater Healthcare

