

Canllaw ar y Peiriant Ocsigen Cludadwy Inogen One G2



Cynnwys

Peiriannau Ocsigen Cludadwy **3**

Dod i Adnabod Rhannau o'ch Peiriant Inogen G2 **4**

Sut mae defnyddio eich Peiriant Inogen G2 **5**

Amser Gweithredu Arferol Pecyn Batri Newydd **6**

Byddwch yn ddiogel **7**

Datrys Problemau **8**



**ENHANCING
LIVES**



Peiriannau Ocsigen Cludadwy

Dyfais fach yw peiriant ocsigen cludadwy, sy'n eich galluogi i symud o gwmpas y tu allan i'r cartref.

Mae'n bwysig bod y gosodiad llif a ofynwyd amdano gan eich Gweithiwr Gofal Iechyd Proffesiynol yn cael ei ddefnyddio.

Sylwch: Mae'r peiriant Inogen One G2 yn parhau i fod yn eiddo i Baywater Healthcare, ac mae ar fenthyg i'r GIG

(ar agor 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos ar gyfer galwadau brys)

Dod i Adnabod Rhannau o'ch Peiriant Inogen G2


- A** Allfa ocsigen
- B** Handlen
- C** Plwg cebl pŵer
- D** Fent wacáu
- E** Pecyn batri
- F** Hidlydd mewnfa aer
- G** Panel rheoli



Rhybudd

Sicrhewch fod y peiriant ocsigen yn cael ei gadw ar i fyny bob amser.

Gwnewch yn siŵr bod y gosodiad llif ar y peiriant ocsigen wedi'i osod i'r gosodiad llif a gafodd ei archebu gan eich Gweithiwr Gofal Iechyd Proffesiynol.

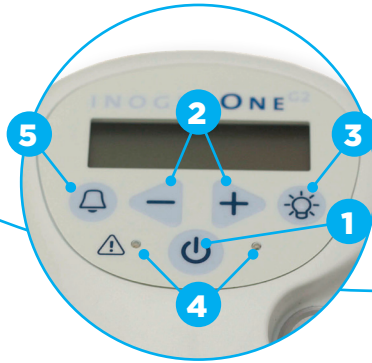

Sut mae Defnyddio eich Peiriant Inogen G2



1. Botwm On/Off

Pwyswch unwaith i'w droi ymlaen, a phwyswch a'i ddal am eiliad i'w ddiffodd.



2. Botwm cynyddu neu leihau gosodiad llif

Defnyddiwch y botymau hyn i osod y llif i'r lefel a gafodd ei rhoi ar bresgripsiwn i chi.




3. Botwm yn dangos y golau ôl

Pwyswch i droi'r golau ôl ymlaen, a bydd yn diffodd yn awtomatig ar ôl ychydig eiliadau.



4. Dangosydd goleuadau

Ffoniwch Baywater Healthcare os ydych chi'n gweld golau coch neu ambr.

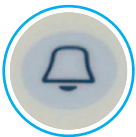

5. Botwm modd/larwm

Pwyswch y botwm i droi'r larwm ymlaen neu i ddiffodd y larwm, sef y botwm sy'n gallu synhwyro bob tro y byddwch chi'n cymryd anadl. Bydd y peiriant yn canu os na fyddwch chi'n cymryd anadl am fwy na 60 eiliad ar ôl i'r botwm rhybudd clywadwy ddangos ar y sgrin.

Amser Gweithredu Arferol Pecyn Batri Newydd

Mae'r tabl canlynol yn dangos yr amser y bydd pecyn batri newydd yn debygol o bara pan fo'r gosodiad ar gyfraddau gwahanol:

Gosodiad cyfradd llif	Modd llif pwls (gosodiad)
1	4 awr 36 munud
2	4 awr 5 munud
3	3 awr 30 munud
4	2 awr 50 munud
5	2 awr 35 munud
6	2 awr 5 munud



Rhybudd

Cadwch eich pecyn batri'n sych bob amser. Os bydd yn dod i gysylltiad â hylif, peidiwch â'i ddefnyddio a ffoniwch Baywater Healthcare. Gall pecynnau batri gwlyb achosi peryglon diogelwch, gan gynnwys tân a sioc drydanol.

Byddwch yn Ddiogel

- Cadwch y peiriant Inogen a'r cebl pŵer i ffwrdd oddi wrth arwynebau poeth a fflamau noeth.
- Peidiwch â defnyddio'r peiriant os oes cebl pŵer neu blwg wedi'i ddfrodi arno.
- Dylai eich peiriant Inogen gael ei ddefnyddio mewn man sydd â llif aer da.
- Dim ond yr ategolion sydd wedi'u rhoi gennym ni y dylech chi eu defnyddio gyda'r ddyfais hon.
- Os bydd y peiriant Inogen wedi'i ollwng, ei ddfrodi neu wedi dod i gysylltiad â dŵr, peidiwch â'i ddefnyddio a ffoniwch Baywater Healthcare ar 0800 373580.
- Peidiwch â rhoi unrhyw wrthrychau i mewn i unrhyw agoriadau yn y peiriant.
- Peidiwch â blocio'r fewnfa aer na'r fent wacáu ar y peiriant Inogen.
- Peidiwch â rhoi blanced, tywel na chwilt ac ati dros y ddyfais.
- Wrth ddefnyddio'r ddyfais mewn cerbyd, gwnewch yn siŵr ei bod wedi'i diogelu'n briodol a'i bod ar i fyny, a gwneud yn siŵr bod gwresogydd neu ataliad arall o'i chwmpas.
- Peidiwch â gadael eich peiriant Inogen, na'ch pecyn batri, yn ardal eistedd neu gist eich cerbyd ar ddiwrnod poeth neu oer iawn.

Rhybudd

Peidiwch â lapio'r cordyn pŵer o amgylch y pecyn pŵer.

Gwnewch yn siŵr mai dim ond cordyn pŵer y peiriant Inogen G2 rydych chi'n ei ddefnyddio.

Cadwch eich offer o'r golwg pan fyddwch chi'n gadael y car heb oruchwyliaeth.

Dylech bob amser dynnu batris o'r peiriant Inogen G2 pan nad yw'n cael ei ddefnyddio.

Peidiwch â rhoi'r peiriant Inogen G2 mewn soced wal diffygiol a, lle bynnag y bo modd, tynnwch y plwg o'r peiriant pan nad yw'n cael ei ddefnyddio.

Datrys problemau

Beth i'w wneud os nad oes ocsigen yn cael ei gynhyrchu

Os nad oes ocsigen yn cael ei gynhyrchu, gall hyn ddangos bod y ddyfais wedi'i diffodd. Rhowch gynnig ar wasgu'r botwm pŵer i'w droi ymlaen ac edrych ar faint o fatri sy'n weddill. Gwiriwch fod y pigynnau trwynol wedi'u cysylltu'n gywir. Os nad yw'r datrysiadau hyn yn gweithio, ffoniwch Baywater Healthcare ar 0800 373580.

Beth i'w wneud os nad yw'r peiriant ocsigen cludadwy yn troi ymlaen ar ôl gwasgu'r botwm 'On'

Mae'n bosibl nad oes gan y batri ddigon o bŵer i droi'r peiriant ymlaen, dylech blygio'r peiriant i mewn i'r prif gyflenwad trydan i'w wefr. Os nad yw hyn yn gweithio, ffoniwch Baywater Healthcare ar 0800 373580.

Beth i'w wneud os bydd y larwm sy'n canfod diffyg anadl yn parhau i seinio, neu os nad oes modd clywed sŵn hisian wrth anadlu

Cysylltwch â'ch Gweithiwr Gofal Iechyd Proffesiynol oherwydd mae'n bosibl y bydd angen adolygiad clinigol arnoch.

Os nad yw'r camau uchod yn datrys y broblem, ffoniwch Baywater Healthcare i gael rhagor o arweiniad.



Nodiadau



I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Baywater Healthcare

Wulvern House
Electra Way
Crewe
Cheshire
CW1 6GW

Ffoniwch: 0800 373580

✉ healthuk@baywater.co.uk

🐦 @BaywaterHealth

📘 Baywater Healthcare

🌐 Baywater Healthcare



This leaflet is also available in English

**ENHANCING
LIVES**

24/743/UK-MAY24 v1