

# Canllaw ar y Peiriant Ocsigen Cludadwy Inogen One G2



# Cynnwys

Peiriannau Ocsigen Cludadwy **3**

Dod i Adnabod Rhannau o'ch Peiriant Inogen G2 **4**

Sut mae defnyddio eich Peiriant Inogen G2 **5**

Amser Gweithredu Arferol Pecyn Batri Newydd **6**

Byddwch yn ddiogel **7**

Datrys Problemau **8**



**ENHANCING  
LIVES**



# Peiriannau Ocsigen Cludadwy

Dyfais fach yw peiriant ocsigen cludadwy, sy'n eich galluogi i symud o gwmpas y tu allan i'r cartref.

**Mae'n bwysig bod y gosodiad llif a ofynwyd amdano gan eich Gweithiwr Gofal Iechyd Proffesiynol yn cael ei ddefnyddio.**

Sylwch: Mae'r peiriant Inogen One G2 yn parhau i fod yn eiddo i Baywater Healthcare, ac mae ar fenthyg i'r GIG

(ar agor 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos ar gyfer galwadau brys)

# Dod i Adnabod Rhannau o'ch Peiriant Inogen G2


- A** Allfa ocsigen
- B** Handlen
- C** Plwg cebl pŵer
- D** Fent wacáu
- E** Pecyn batri
- F** Hidlydd mewnfa aer
- G** Panel rheoli



## Rhybudd

Sicrhewch fod y peiriant ocsigen yn cael ei gadw ar i fyny bob amser.

Gwnewch yn siŵr bod y gosodiad llif ar y peiriant ocsigen wedi'i osod i'r gosodiad llif a gafodd ei archebu gan eich Gweithiwr Gofal Iechyd Proffesiynol.

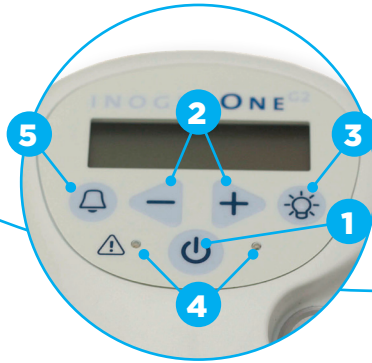

# Sut mae Defnyddio eich Peiriant Inogen G2



## 1. Botwm On/Off

Pwyswch unwaith i'w droi ymlaen, a phwyswch a'i ddal am eiliad i'w ddiffodd.



## 2. Botwm cynyddu neu leihau gosodiad llif

Defnyddiwch y botymau hyn i osod y llif i'r lefel a gafodd ei rhoi ar bresgripsiwn i chi.




## 3. Botwm yn dangos y golau ôl

Pwyswch i droi'r golau ôl ymlaen, a bydd yn diffodd yn awtomatig ar ôl ychydig eiliadau.



## 4. Dangosydd goleuadau

Ffoniwch Baywater Healthcare os ydych chi'n gweld golau coch neu ambr.

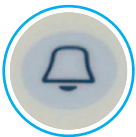

## 5. Botwm modd/larwm

Pwyswch y botwm i droi'r larwm ymlaen neu i ddiffodd y larwm, sef y botwm sy'n gallu synhwyro bob tro y byddwch chi'n cymryd anadl. Bydd y peiriant yn canu os na fyddwch chi'n cymryd anadl am fwy na 60 eiliad ar ôl i'r botwm rhybudd clywadwy ddangos ar y sgrin.

# Amser Gweithredu Arferol Pecyn Batri Newydd

Mae'r tabl canlynol yn dangos yr amser y bydd pecyn batri newydd yn debygol o bara pan fo'r gosodiad ar gyfraddau gwahanol:

Gosodiad cyfradd llif	Modd llif pwls (gosodiad)
1	4 awr 36 munud
2	4 awr 5 munud
3	3 awr 30 munud
4	2 awr 50 munud
5	2 awr 35 munud
6	2 awr 5 munud



## Rhybudd

Cadwch eich pecyn batri'n sych bob amser. Os bydd yn dod i gysylltiad â hylif, peidiwch â'i ddefnyddio a ffoniwch Baywater Healthcare. Gall pecynnau batri gwlyb achosi peryglon diogelwch, gan gynnwys tân a sioc drydanol.

# Byddwch yn Ddiogel

- Cadwch y peiriant Inogen a'r cebl pŵer i ffwrdd oddi wrth arwynebau poeth a fflamau noeth.
- Peidiwch â defnyddio'r peiriant os oes cebl pŵer neu blwg wedi'i ddfirodi arno.
- Dylai eich peiriant Inogen gael ei ddefnyddio mewn man sydd â llif aer da.
- Dim ond yr ategolion sydd wedi'u rhoi gennym ni y dylech chi eu defnyddio gyda'r ddyfais hon.
- Os bydd y peiriant Inogen wedi'i ollwng, ei ddfirodi neu wedi dod i gysylltiad â dŵr, peidiwch â'i ddefnyddio a ffoniwch Baywater Healthcare ar 0800 373580.
- Peidiwch â rhoi unrhyw wrthrychau i mewn i unrhyw agoriadau yn y peiriant.
- Peidiwch â blocio'r fewnfa aer na'r fent wacáu ar y peiriant Inogen.
- Peidiwch â rhoi blanced, tywel na chwilt ac ati dros y ddyfais.
- Wrth ddefnyddio'r ddyfais mewn cerbyd, gwnewch yn siŵr ei bod wedi'i diogelu'n briodol a'i bod ar i fyny, a gwneud yn siŵr bod gwresogydd neu ataliad arall o'i chwmpas.
- Peidiwch â gadael eich peiriant Inogen, na'ch pecyn batri, yn ardal eistedd neu gist eich cerbyd ar ddiwrnod poeth neu oer iawn.

## Rhybudd

Peidiwch â lapio'r cordyn pŵer o amgylch y pecyn pŵer.

Gwnewch yn siŵr mai dim ond cordyn pŵer y peiriant Inogen G2 rydych chi'n ei ddefnyddio.

Cadwch eich offer o'r golwg pan fyddwch chi'n gadael y car heb oruchwyliaeth.

Dylech bob amser dynnu batris o'r peiriant Inogen G2 pan nad yw'n cael ei ddefnyddio.

Peidiwch â rhoi'r peiriant Inogen G2 mewn soced wal diffygiol a, lle bynnag y bo modd, tynnwch y plwg o'r peiriant pan nad yw'n cael ei ddefnyddio.

# Datrys problemau

## Beth i'w wneud os nad oes ocsigen yn cael ei gynhyrchu

Os nad oes ocsigen yn cael ei gynhyrchu, gall hyn ddangos bod y ddyfais wedi'i diffodd. Rhowch gynnig ar wasgu'r botwm pŵer i'w droi ymlaen ac edrych ar faint o fatri sy'n weddill. Gwiriwch fod y pigynnau trwynol wedi'u cysylltu'n gywir. Os nad yw'r datrysiadau hyn yn gweithio, ffoniwch Baywater Healthcare ar 0800 373580.

## Beth i'w wneud os nad yw'r peiriant ocsigen cludadwy yn troi ymlaen ar ôl gwasgu'r botwm 'On'

Mae'n bosibl nad oes gan y batri ddigon o bŵer i droi'r peiriant ymlaen, dylech blygio'r peiriant i mewn i'r prif gyflenwad trydan i'w wefr. Os nad yw hyn yn gweithio, ffoniwch Baywater Healthcare ar 0800 373580.

## Beth i'w wneud os bydd y larwm sy'n canfod diffyg anadl yn parhau i seinio, neu os nad oes modd clywed sŵn hisian wrth anadlu

Cysylltwch â'ch Gweithiwr Gofal Iechyd Proffesiynol oherwydd mae'n bosibl y bydd angen adolygiad clinigol arnoch.

**Os nad yw'r camau uchod yn datrys y broblem, ffoniwch Baywater Healthcare i gael rhagor o arweiniad.**













I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

**Baywater Healthcare**

Wulvern House  
Electra Way  
Crewe  
Cheshire  
CW1 6GW

Ffoniwch: 0800 373580

- ✉ [healthuk@baywater.co.uk](mailto:healthuk@baywater.co.uk)
- 🐦 [@BaywaterHealth](https://twitter.com/BaywaterHealth)
- 📘 Baywater Healthcare
- 🌐 Baywater Healthcare



This leaflet is also available in English

**ENHANCING  
LIVES**

16/316/UK-AUG23 v2